



Das RedVac System für Vakuumschienen

Ein Multi-Kammer-System hält das Granulat in der richtigen Position und macht die Anlegung schnell und unkompliziert



Biokompatible, strapazierfähige Außenhülle - schnell und einfach zu reinigen




Selbstschließendes Ventil



Das RedVac Gurtsystem

Rote Streifen zur Befestigung der abnehmbaren, frei positionierbaren und beidseitig verstellbaren Gurte

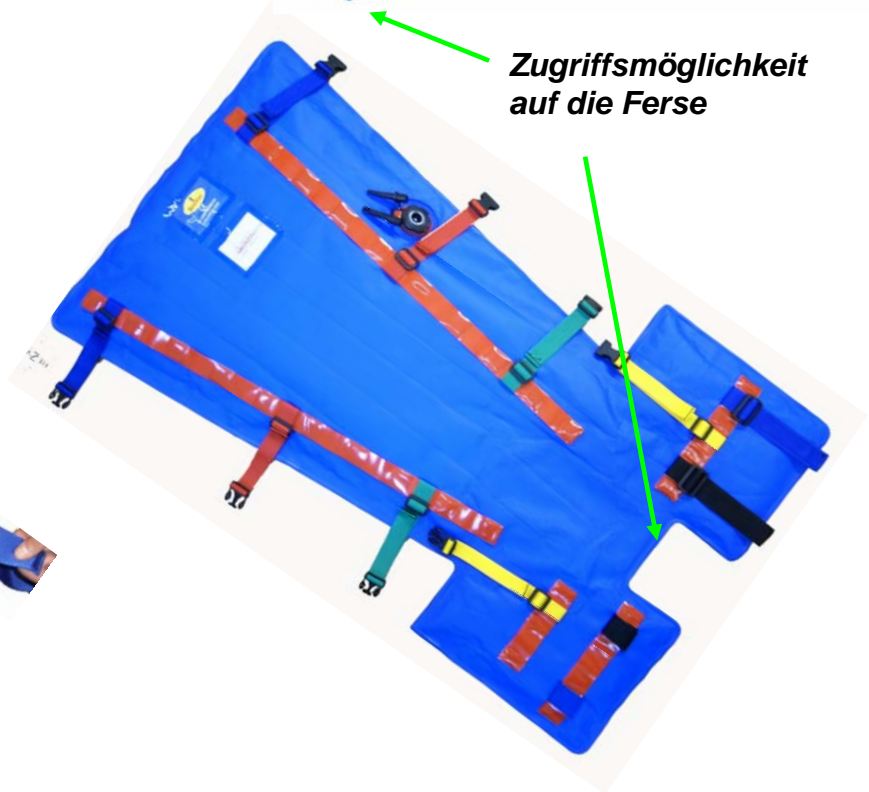

Zugriffsmöglichkeit auf die Ferse

Optionale Gurtsysteme

Rote Streifen zur Befestigung der abnehmbaren, frei positionierbaren Klettgurte



Ösen zur Befestigung der abnehmbaren und beidseitig verstellbaren Gurte







Nicht abnehmbare, fest angeschweißte Klettgurte



Design - abgewinkelt

	<p>VS63X01 Arm- und Knöchelschiene 5 Gurte Breite: Ellbogen/Hand 43cm/70cm Länge: 56cm Gewicht: 0,9kg</p>
	<p>VS65X01 Beinschiene 5 Gurte Breite: Oberschenkel/Fuß: 64cm/70cm Länge: 103cm Gewicht: 1,9kg</p>

Design - gerade

	<p>VA14X01 Armschiene 4 Gurte Breite: Ellbogen/Hand: 50cm/30cm Länge: 67cm Gewicht: 0,9kg</p>
	<p>VK15X01 Knöchel-Universalschiene 4 Gurte Breite: 47cm Länge: 57cm Gewicht: 0,9kg</p>
	<p>VL21X01 Beinschiene 5 Gurte Breite: Oberschenkel/Fuß: 70cm/40cm Länge: 110cm Gewicht: 1,9kg</p>
	<p>VL18X01 Beinschiene 5 Gurte Breite: Oberschenkel/Fuß: 70cm/45cm Länge: 135cm Gewicht: 2,1kg</p>